

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Central de Monitorização



**A DIXTAL SE DESDOBRA PARA
DAR MAIS SEGURANÇA A VOCÊ**

SISTEMA DE INFORMAÇÃO CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO

ALARMES

- Reprodução dos alarmes do monitor multiparamétrico
- Indicação com seta do limite de alarme excedido por um determinado parâmetro, de forma semelhante ao monitor
- Configuração remota dos limites e níveis de alarme do monitor multiparamétrico
- Diferentes tipos de alarmes e toques para diferentes níveis de severidade, conforme norma da Comunidade Européia
- Visualização de todos os parâmetros em alarmes, arritmias, alertas (sensor desconectado, eletrodos soltos, etc.) para cada monitor multiparamétrico
- Registro de eventos de alarme e arritmia cardíaca
- Configuração dos dispositivos que devem alarmar (monitor, central ou ambos)

IMPRESSÃO

- Impressão de histórico de traçados, tendência e evolução tabular, com possibilidade de seleção dos traçados/parâmetros e período desejados
- Impressão de cálculos e zoom, disparados do monitor
- Impressão de zoom, com parâmetros atuais e últimos 10 segundos de todos os traçados

OUTROS

- Exportação de dados em XLS e DICOM Waveforms
- Monitor de Vídeo LCD de 17"
- Impressora Laser
- Integração HL7

OPCIONAIS

- Adição de outro Monitor de Vídeo 17" (visualização por meio de duas telas)
- Uso de outros tamanhos de vídeo
- Integração com Sistema de Prescrição Médica DIXTAL
- Integração com Sistema QuaTI®
- Visualização de Imagens do Paciente por meio de câmeras de vídeo (DX-CAM)
- Acesso Remoto da Central para acompanhamento
- Visualização e Manipulação de Imagens Médicas – PACS – por meio de protocolo DICOM (DX-Imagem)

	2 Telas	Portal
DX-2OCTO-N		
DX-2OCT1-N	●	
DX-2OCTO-P		●
DX-2OCT1-P	●	●



DIXTAL BIOMÉDICA IND. COM. LTDA.

Manaus - AM - Av. Rodrigo Otávio, 1111 - Japiim - 69077-000

Porto Alegre - RS - Av. Cristóvão Colombo, 1636 - 90560-001

São Paulo - SP - R. Eng. Francisco Pitta Brito, 703 - 04753-080
Tel. 11 5548-4155 - Fax 11 5548-4883

www.dixtal.com.br

Patentes requeridas. Algumas funcionalidades são opcionais. Fotos ilustrativas. Sujeito a alteração sem aviso prévio.

O que é importante para você no dia-a-dia da sua UTI?

Agilidade nas informações?

Dados para a tomada de decisão?

Visualização de exames na tela?

Essas funcionalidades e outras como acesso à prescrição eletrônica, imagem do paciente no leito em tempo real e o acompanhamento completo da evolução do paciente através do histórico (desde a internação até a saída) você encontra na Central de Monitorização DIXTAL.



Sistema de Informação. Central de Monitorização. Mais colaboração, flexibilidade e segurança.

MONITORIZAÇÃO EM TEMPO REAL


- Exibição de até 21 monitores multiparamétricos DX 2010, DX 2020 e/ou DX 2021 simultaneamente (opcional: 42 leitos)
- Todos os parâmetros e traçados
- Seleção e exibição somente dos traçados e parâmetros desejados
- Exibição do último evento ocorrido em cada leito
- Configuração de velocidade e ganho
- Congelamento dos traçados
- Disparo de NIBP



- Tela multi-paciente auto-ajustável de acordo com o número de leitos



- Tela de zoom exibindo todos os traçados e parâmetros disponíveis, e miniaturas dos outros monitores

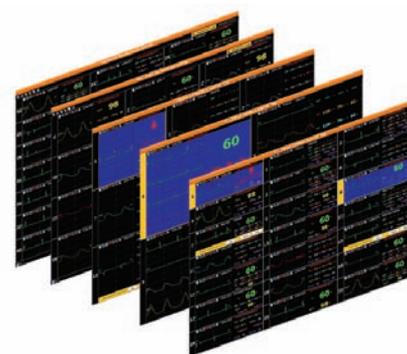

- Possibilidade de alternar 5 telas com até 21 leitos em cada uma

MONITORIZAÇÃO OFF-LINE

- Tendência tabular e gráfica, eventos e Full Disclosure de 240 horas
- Visualização do histórico ou tendência de qualquer traçado ou parâmetro fisiológico monitorado
- Traçados em formato comprimido, com sinalização dos eventos
- Inserção de evento pelo usuário
- Medição de traçado
- Possibilidade de visualização dos traçados de qualquer momento, a partir de um evento, ponto da tendência ou traçado comprimido

INTERNAÇÃO/ALTA/TRANSFERÊNCIA/HOSPITAL

- Internação de paciente
- Busca entre os pacientes cadastrados
- Armazenamento dos dados mesmo sem internação. Quando a internação ocorre, recebe os dados armazenados até então
- Transferência do paciente entre leitos sem perda das informações

CONTROLE DE ACESSO

- Bloqueio das funcionalidades de configuração mediante definição de senhas para usuário e administrador